

CONSUMER PLASTERS AND ADHESIVE TAPES

MATOPAT

2021



01

Classification

general information

02

Packaging lines

packaging tailored to the needs of the markets

03

Matopat offer


“just in case” plasters and adhesive dates




01

Classification

CLASSIFICATION OF PLASTERS AND ADHESIVE TAPES IN TZMO'S OFFER

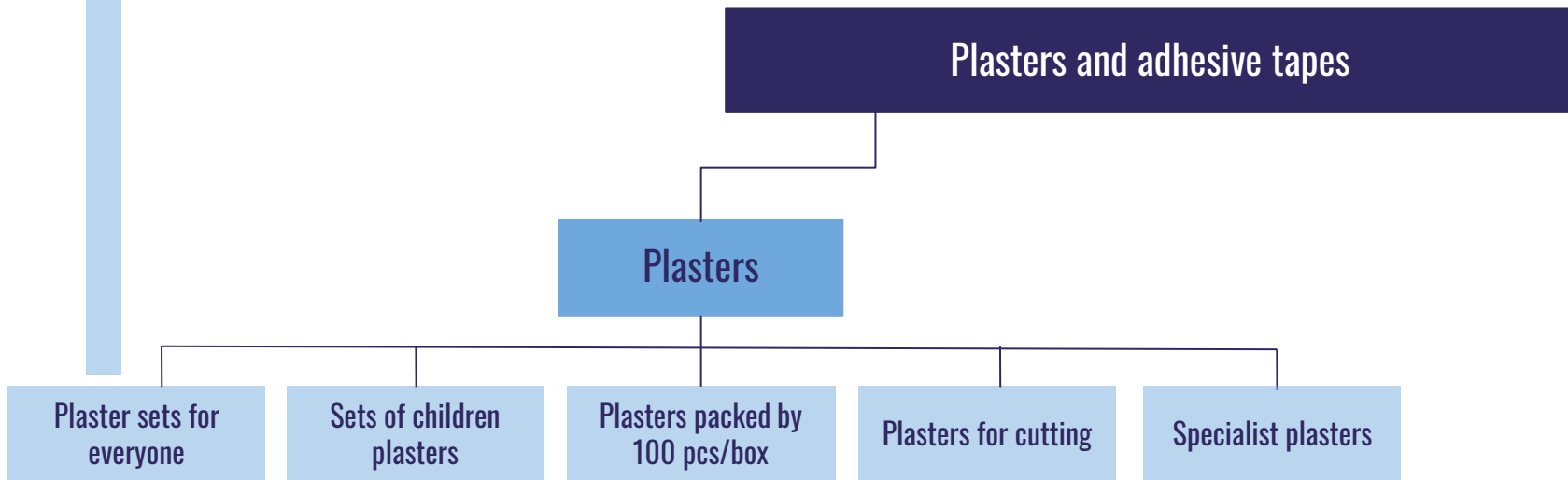

COSTRUZIONE DI UN CEROTTO PER LA FASCIATURA DI UNA FERITA

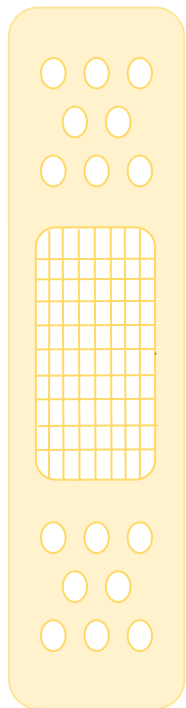

base

un supporto realizzato con materiali naturali o sintetici o una combinazione di essi, che può essere utilizzato da solo (ad esempio un idrogel, idrocolloide, una medicazione in silicone) o con uno strato adesivo applicato

nucleo protettivo

cuscino assorbente a base di materiali naturali o sintetici o loro combinazioni, con o senza strato atraumatico, con o senza principi attivi (antibatterico, omeostatico, rinfrescante, riscaldante). Grazie allo strato atraumatico, il pad assorbente non si attacca alla ferita e cambiare il cerotto non causa dolore.

adesivo

una composizione adesiva di sostanze di origine naturale o sintetica (o loro combinazioni) applicata alla base, che non ha effetti farmacologici, immunologici e metabolici sul corpo umano

strato protettivo

uno strato di carta o pellicola per proteggere dallo sporco

CEROTTI BIOLOGICAMENTE ATTIVO

I cerotti biologicamente attivi contengono sostanze attive con un effetto terapeutico.

Prima dell'uso, legga il foglio illustrativo allegato a ciascuna confezione.

L'offerta TZMO comprende **cerotti Comfort per calli**

I restanti cerotti non contengono farmaci o composti biologicamente attivi e i loro effetti funzionali (ad esempio protettivi, assorbenti, atraumatici) sono dovuti alle proprietà fisiche e meccaniche del cerotto



02

Packaging lines

GLOBAL LINE (GLMM) 13 SETS



EN/DE sulla parte anteriore della confezione (for Monsters - EN/DE/PL).

Descrizione in 16 lingue sul retro della confezione.

www.naturalwooldistribution.it





03

Matopat offer

www.naturalwooldistribution.it





Set cerotti non sterile
per vacanze e non solo

www.naturalwooldistribution.it



CEROTTI NON STERILI CON MEDICAZIONE PER FERITE - CARATTERISTICHE

- sono usati per proteggere piccole ferite, tagli, abrasioni e graffi
- protegge perfettamente la ferita dalla contaminazione
- nucleo assorbente fissata con una speciale rete atraumatica
- strato adesivo sotto forma di adesivo acrilico (Fixopore S - adesivo in gomma sintetica) che non irrita nemmeno la pelle più delicata
- varie forme e dimensioni permettono di proteggere qualsiasi dimensione di lesioni
- testato per irritazione, sensibilizzazione e citotossicità secondo ISO 10993-5 e ISO 10993-10. Sulla base dei risultati del test, i cerotti sono biocompatibili e non mostrano effetti irritanti, sensibilizzanti o citotossici.



UNIVERSAL PROTEZIONE BASE

Proteggono perfettamente la ferita da sporco e acqua.


Il supporto flessibile e microporoso consente alla pelle di respirare.



UNIVERSAL PROTEZIONE BASE

Il set contiene 20 cerotti in 5 formati:

- **25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **19 mm x 76 mm 6 pcs**
- **15 mm x 58 mm 4 pcs**
- **9 mm x 38 mm 4 pcs**
- **∅ 22 mm 2 pcs**

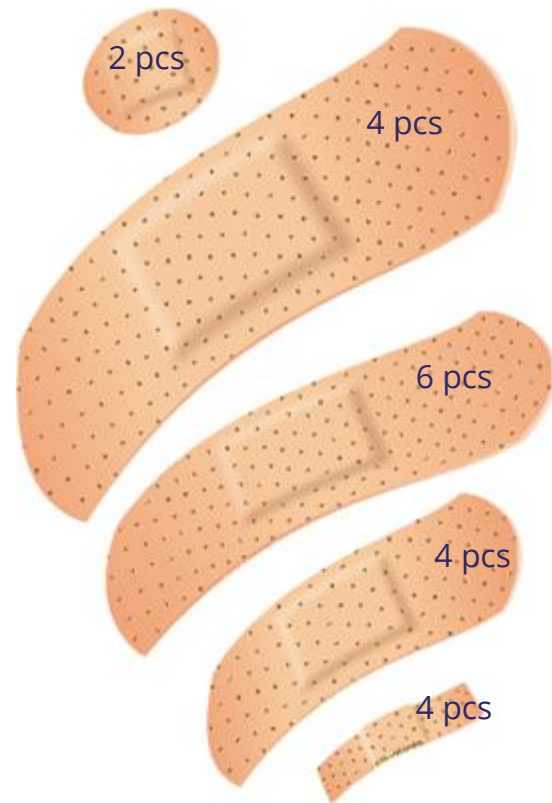

TRANSPARENT PROTEZIONE BASE

Un set di cerotti ideale per una discreta protezione dei tagli.

La base trasparente del cerotto e la parte centrale color carne lo rendono quasi invisibile sulla pelle.

Il supporto flessibile e microporoso consente alla pelle di respirare.
Insostituibile per tagli sulle mani, sul viso o sul collo.



TRANSPARENT PROTEZIONE BASE

Il set contiene 20 cerotti in 5 formati:

- **25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **19 mm x 76 mm 6 pcs**
- **15 mm x 58 mm 4 pcs**
- **9 mm x 38 mm 4 pcs**
- **∅ 22 mm 2 pcs**



CLASSIC PER QUELLI ATTIVI

Sono realizzati in tessuto flessibile, resistente e traspirante, perfetto per le parti mobili del corpo, ad esempio per le persone che praticano sport.

La base del cerotto fornisce un'elevata resistenza allo strappo e la sua flessibilità garantisce una buona adesione alla pelle anche in aree che si piegano, come gomiti o ginocchia.



CLASSIC PER QUELLI ATTIVI

Il set contiene 12 cerotti in 2 dimensioni:

- **25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **19 mm x 76 mm 8 pcs**



AQUA STOP PER NUOTARE E FARE IL BAGNO

Cerotti che proteggono particolarmente la ferita dall'accesso dell'acqua.

Perfetto per nuotare, fare il bagno o lavare i piatti.

Non si staccano sotto pressione dell'acqua.


Il supporto color carne estremamente sottile e flessibile rende questi cerotti piacevoli da indossare.



AQUA STOP PER NUOTARE E FARE IL BAGNO

Il set contiene 18 cerotti in 4 formati:

- **25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **19 mm x 76 mm 8 pcs**
- **38 mm x 38 mm 4 pcs**
- **50 mm x 76 mm 2 pcs**

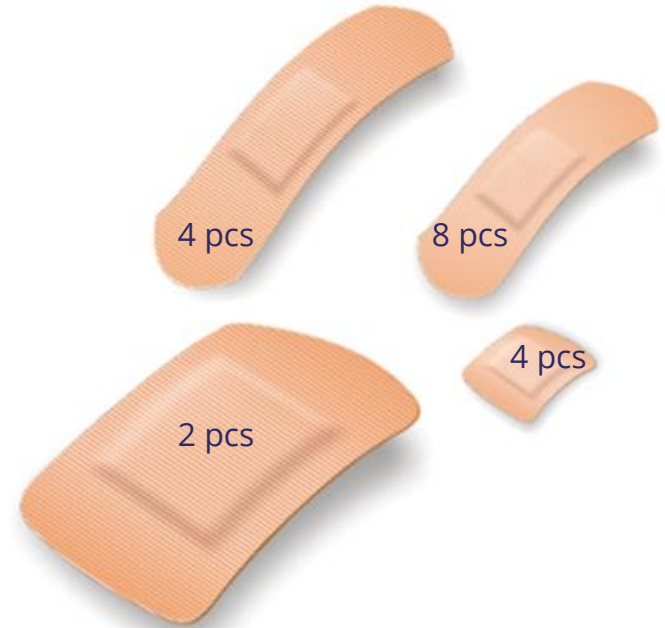

COMFORT PROTEZIONE CONTRO LA PRESSIONE


Cerotti con struttura spugnosa confortevole e morbida consigliati per la protezione di parti esposte a pressione o per alleviare abrasioni, calli o borsite.



COMFORT PROTEZIONE CONTRO LA PRESSIONE

Il set contiene 12 cerotti in 2 dimensioni:

- **25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **19 mm x 76 mm 8 pcs**

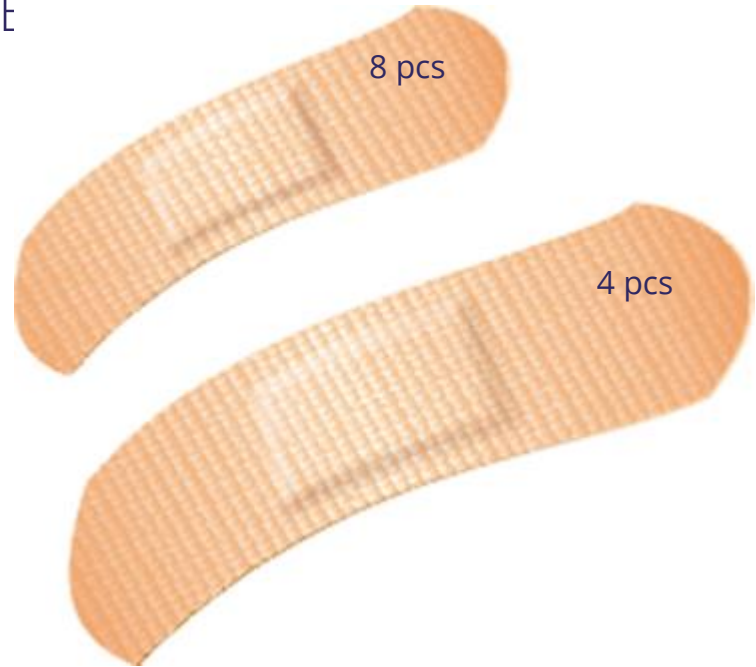

FAMILY FAMIGLIA MINI KIT DI PRONTO SOCCORSO

È un insieme di cerotti in diverse forme, più spesso utilizzati per vestire ferite e tagli minori.

Il set contiene i seguenti :

- delicato SOFT
- durevole CLASSIC
- waterproof AQUASTOP
- economico UNIVERSAL
- discreto TRANSPARENT
- per i più piccoli HAPPY

I cerotti forniscono un'eccellente protezione contro lo sporco e l'umidità (cerotti con una base di pellicola).




FAMILY

FAMIGLIA MINI KIT DI PRONTO SOCCORSO

Il set contiene 17 cerotti in 6 formati

- **Universal 25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **Universal 15 mm x 58 mm 4 pcs**
- **Happy 19 mm x 76 mm 2 pcs**
- **Aqua Stop 50 mm x 76 mm 1 pc**
- **Transparent Ø 22 mm 4 pcs**
- **Soft 6 cm x 10 cm 1 pc**
- **Classic 6 cm x 10 cm 1 pc**

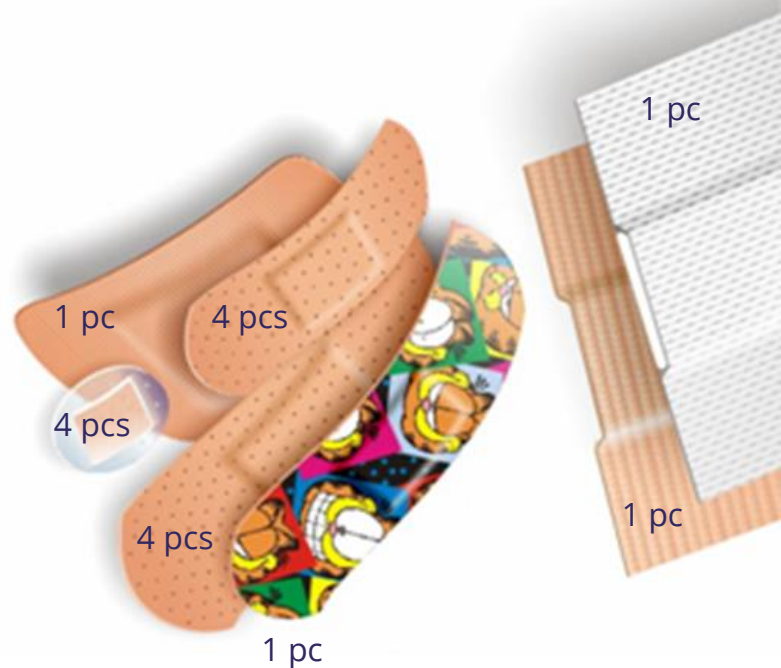

TRAVEL SET PERFETTO PER VIAGGIARE

Il pacchetto include un'ampia varietà di cerotti realizzati con una varietà di materiali e dimensioni.

Questa diversità consente di proteggere in modo sicuro durante il viaggio le ferite base.

Il set contiene i seguenti cerotti:

- durevole CLASSIC,
- economico UNIVERSAL
- island dressing FIXOPORE S
- pensato per i più piccoli KIDS ZOO

I cerotti forniscono un'eccellente protezione per la ferita contro la contaminazione.



TRAVEL SET PERFETTO PER VIAGGIARE

Il set contiene 25 cerotti in 7 formati:

- **UNIVERSAL 25 mm x 76 mm 4 pcs**
- **UNIVERSAL 15 mm x 58 mm 5 pcs**
- **UNIVERSAL 9 mm x 38 mm 4 pcs**
- **UNIVERSAL Ø 22 mm 4 pcs**
- **KIDS ZOO 19 mm x 76 mm 4 pcs**
- **FIXOPORE S 5 cm x 7.6 cm 2 pcs**
- **CLASSIC 6 cm x 10 cm 2 pcs**



SUMMARY

	Universal	Transparent	Classic	Aqua Stop	Comfort	Family	Travel Set
quantity	20	12	12	18	12	17	25
carrier	film	film	fabric	film	foam	depending on the plaster in the packaging	
adhesive	acrylic*						
sizes	25 mm x 76 mm 19 mm x 76 mm 15 mm x 58 mm 9 mm x 38 mm ø 22 mm	25 mm x 76 mm 19 mm x 76 mm 15 mm x 58 mm 9 mm x 38 mm ø 22 mm	25 mm x 76 mm 19 mm x 76 mm	25 mm x 76 mm 19 mm x 76 mm 38 mm x 38 mm 50 mm x 76 mm	25 mm x 76 mm 19 mm x 76 mm	Universal 25 mm x 76 mm Universal 15 mm x 58 mm Happy 19 mm x 76 mm Aqua Stop 50 mm x 76 mm Transparent ø 22 mm Soft 6 cm x 10 cm Classic 6 cm x 10 cm 1	UNIVERSAL 25 mm x 76 mm UNIVERSAL 15 mm x 58 mm UNIVERSAL 9 mm x 38 mm UNIVERSAL ø 22 mm KIDS ZOO 19 mm x 76 mm FIXOPORE S 5 cm x 7.6 cm CLASSIC 6 cm x 10 cm
packaging	GLMM, PLMM, VGLM, MMMK	GLMM, PLMM, VGLM, MMMK	GLMM, PLMM, VGLM, MMMK	GLMM, PLMM, MMMK	GLMM, PLMM, VGLM, MMMK	GLMM, PLMM, MMMK	GLMM

* Fixopore S from the Travel set has synthetic rubber adhesive

plastery.matopat.pl






Set di cerotti per bambini

HAPPY CON UN PERSONAGGIO DEI CARTONI ANIMATI

L'immagine colorata del gatto Garfield distrae i bambini dall'essere feriti.

La base flessibile e microporosa del cerotto protegge la ferita dall'acqua e dalla contaminazione, consentendo al contempo alla pelle di respirare.

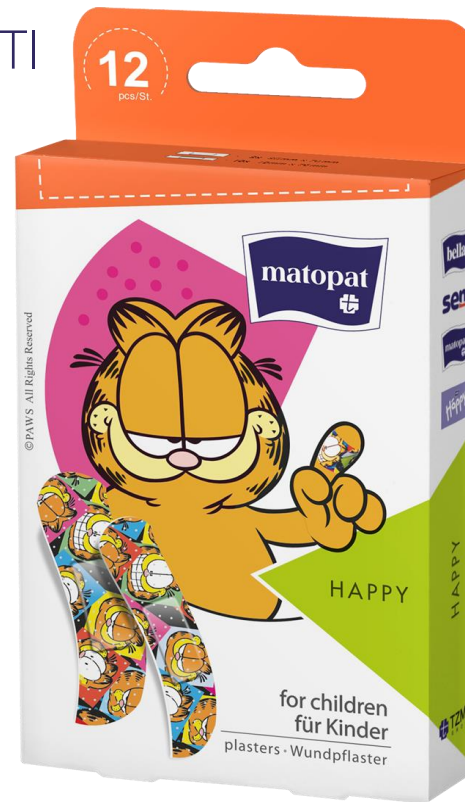

HAPPY CON UN PERSONAGGIO DEI CARTONI AN

Il set contiene 12 cerotti in 2 dimensioni:

- **25 mm x 76 mm 2 pcs**
- **19 mm x 76 mm 10 pcs**



HAPPY TATTOO TATUAGGI IMPERMEABILI

Il cerotto agisce come una "seconda pelle" per proteggere la ferita dall'accesso di acqua, batteri e sporco, permettendogli di "respirare".

Le stampe colorate sembrano tatuaggi sulla ferita, distogliendo l'attenzione del bambino dal taglio.

Completamente impermeabile, adatto per il bagno.

Quattro stampe colorate che ogni bambino vuole avere incollato, anche senza farsi male. Parere positivo dell'Istituto Madre e Bambino No. Op-5120




HAPPY TATTOO TATUAGGI IMPERMEABILI

Il set contiene 12 cerotti in un'unica dimensione:

- **25 mm x 57 mm**

4 tipi di stampa

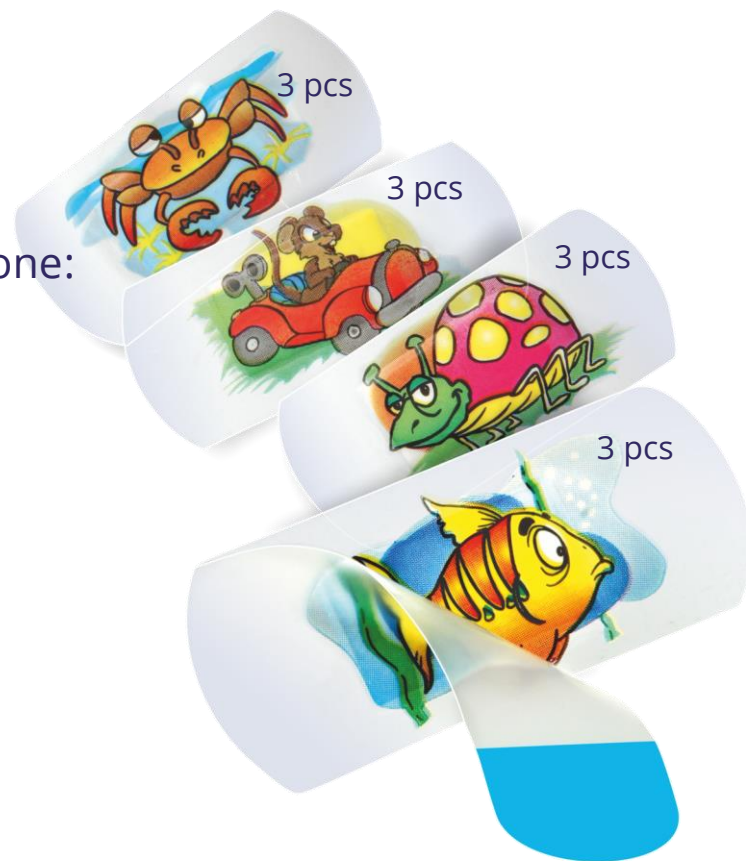

KIDS ZOO HAPPY ANIMALS

Cerotti colorati con le immagini di animali.
La stampa colorata distoglie l'attenzione
del bambino dalla ferita.

La base flessibile e microporosa del
cerotto protegge la ferita dall'acqua e
dalla contaminazione, consentendo al
contempo alla pelle di respirare.
Parere positivo dell'Istituto Madre e
Bambino No. Op-5120,



KIDS ZOO HAPPY ANIMALS

Il set contiene 12 cerotti in un'unica
dimensione:

- **19 mm x 76 mm**

6 tipi di stampe



12 pcs

MONSTERS CEROTTI COLORATI

Il mondo del gioco e dell'immaginazione dei bambini è pieno di colori.

Cerotti dai colori vivaci, con divertenti immagini di mostri.

Ogni bambino troverà il suo "mostro" preferito.

La base flessibile e microporosa del cerotto protegge la ferita dall'acqua e dalla contaminazione, consentendo alla pelle di respirare.



MONSTERS CEROTTI COLORATI

Il set contiene 12 cerotti
in un'unica taglia:

- **19 mm x 76 mm**

7 tipi di stampe



SUMMARY

	Happy	Happy Tattoo	Kids Zoo	Monsters
quantity	12			
carrier	film with colourful print			
adhesive	arylic			
sizes	25 mm x 76 mm 19 mm x 76 mm	19 mm x 76 mm	19 mm x 76 mm	19 mm x 76 mm
packaging	GLMM, PLMM, VGLM, MMMK	GLMM, PLMM, MMMK	GLMM, PLMM	GLMM



Senza tempo
cerotti da tagliare

SOFT DELICATE

Un cerotto delicato con una fascia su una base non tessuta, particolarmente raccomandato per le persone con pelle sensibile.

Si stacca facilmente e indolore anche da zone delicati come il viso, la scollatura o il collo.


Un pezzo di cerotto consente una regolazione individuale e precisa delle dimensioni della medicazione in modo da misurare la dimensione della ferita.



SOFT DELICATE

La confezione contiene un rotolo di cerotto con dimensioni:

- **6 cm x 0,50 m**

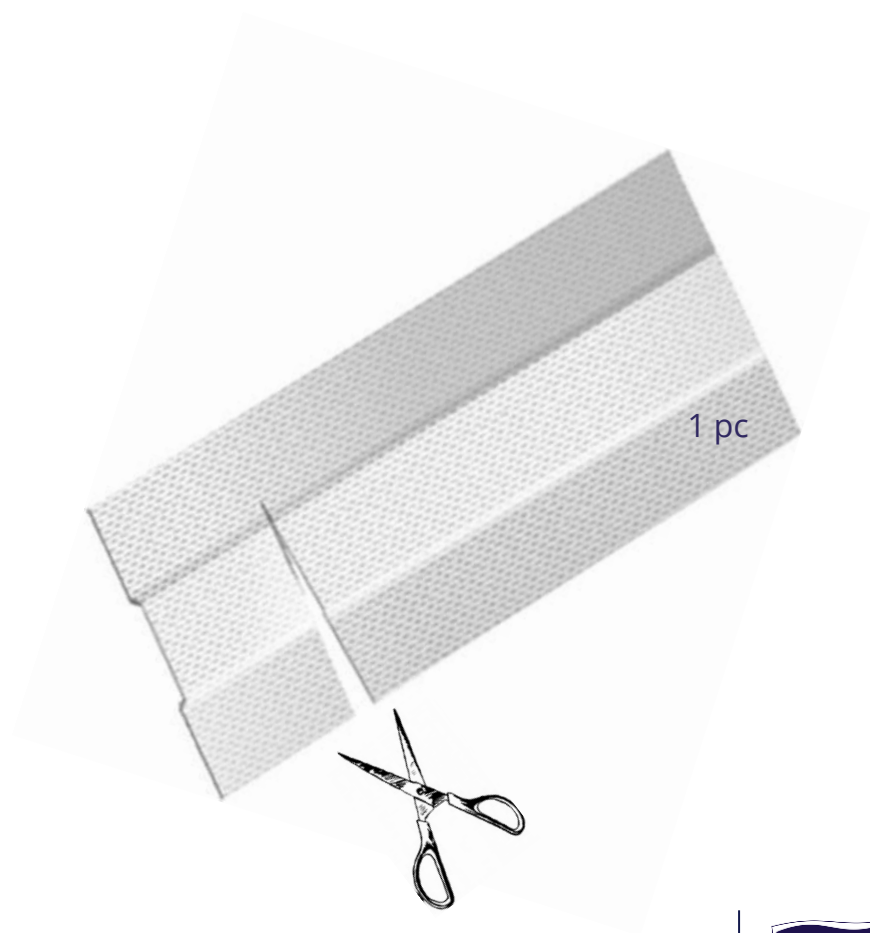

CLASSIC DUREVOLE

Il cerotto è realizzato in materiale estremamente flessibile e resistente che aderisce perfettamente alla pelle.

Consigliato per tagli e abrasioni su ginocchia, gomiti e altre articolazioni.


Un pezzo di cerotto consente una regolazione individuale e precisa delle dimensioni della medicazione in modo da misurare la dimensione della ferita.



CLASSIC DUREVOLE

La confezione contiene un rotolo di cerotto con dimensioni:

- **6 cm x 0,50 m**

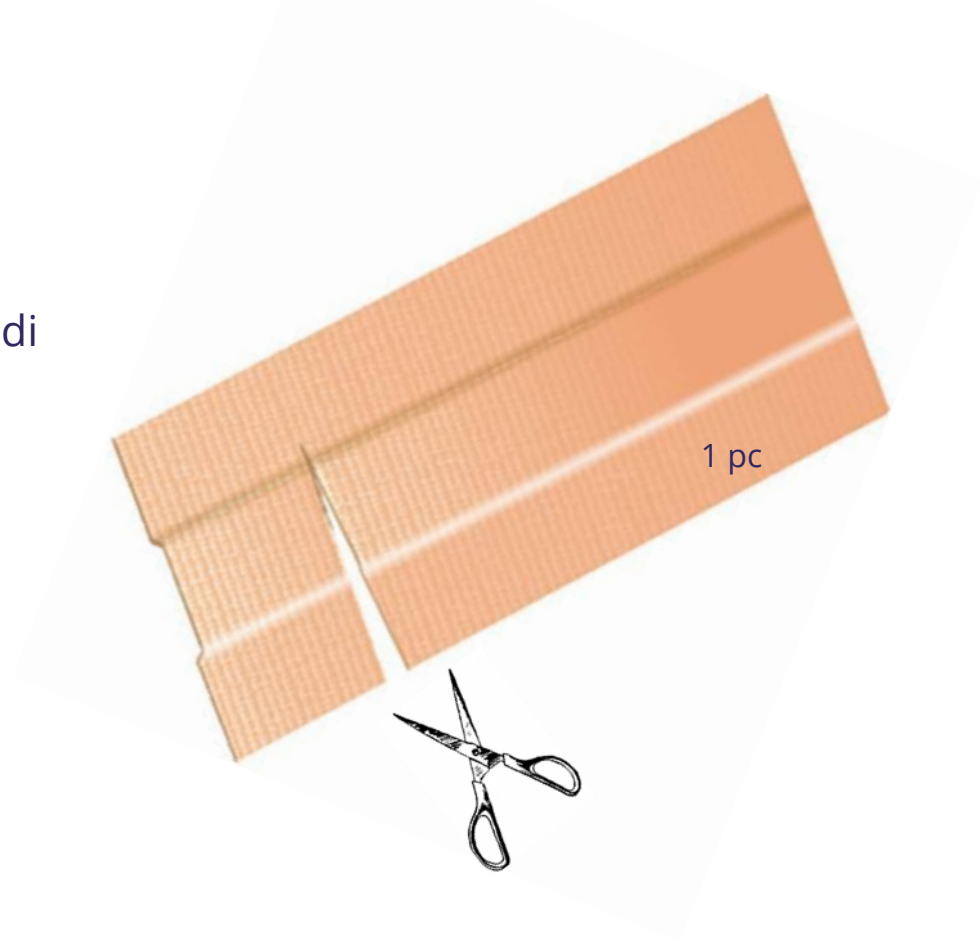

IMBALLAGGIO DI SPEDIZIONE = DISPENSER

La confezione è molto pratica e funzionale.

Dopo aver strappato il lembo, la scatola di cartone può essere utilizzata per l'organizzazione e l'esposizione.





Cerotti specifici per vesciche
e calli

COMFORT PLUS CEROTTI **IDROCOLLOIDALE**

I cerotti idrocolloidi flessibili sono un primo soccorso per le vesciche sulla pelle.

Sono adatti anche per il trattamento di tagli minori, graffi, abrasioni, ferite e ustioni.

Impermeabili, riducono la pressione, minimizzano il dolore, proteggono dalla contaminazione, sono quasi invisibili sulla pelle.



COMFORT PLUS CEROTTI IDROCOLLOIDALE

Cos'è un idrocolloide?

L'idrocolloide è un materiale medico collaudato che è stato utilizzato per anni nella produzione di medicazioni mediche, utilizzato con successo nel trattamento professionale di ferite difficili da guarire.



Come funzionano i cerotti idrocolloidali?

Sia i cerotti che le medicazioni realizzati con questo materiale fungono da "seconda pelle", cioè dall'interno creano condizioni ottimali per la guarigione delle ferite e dall'esterno sono una barriera all'acqua, allo sporco e ai batteri.

Lo spessore del prodotto assorbe perfettamente la pressione e l'attrito, nonché eventuali lesioni meccaniche. La tecnologia moderna consente al prodotto di rimanere sulla ferita per un massimo di un lungo periodo di tempo - fino a 7 giorni!

COMFORT PLUS CEROTTI IDROCOLLOIDALE


Condizioni di guarigione ottimali - Che cosa significa?

Le condizioni di guarigione ottimali sono, soprattutto, un ambiente umido, una temperatura appropriata e la protezione della ferita da fattori esterni.

È clinicamente dimostrato che le ferite trattate in un ambiente umido guariscono in media il 50% più velocemente delle ferite guarite in un ambiente asciutto con medicazioni di garza.*

* © Nature Publishing Group, 20 01 1962, vol. 193

COMFORT PLUS CEROTTI IDROCOLLOIDALE

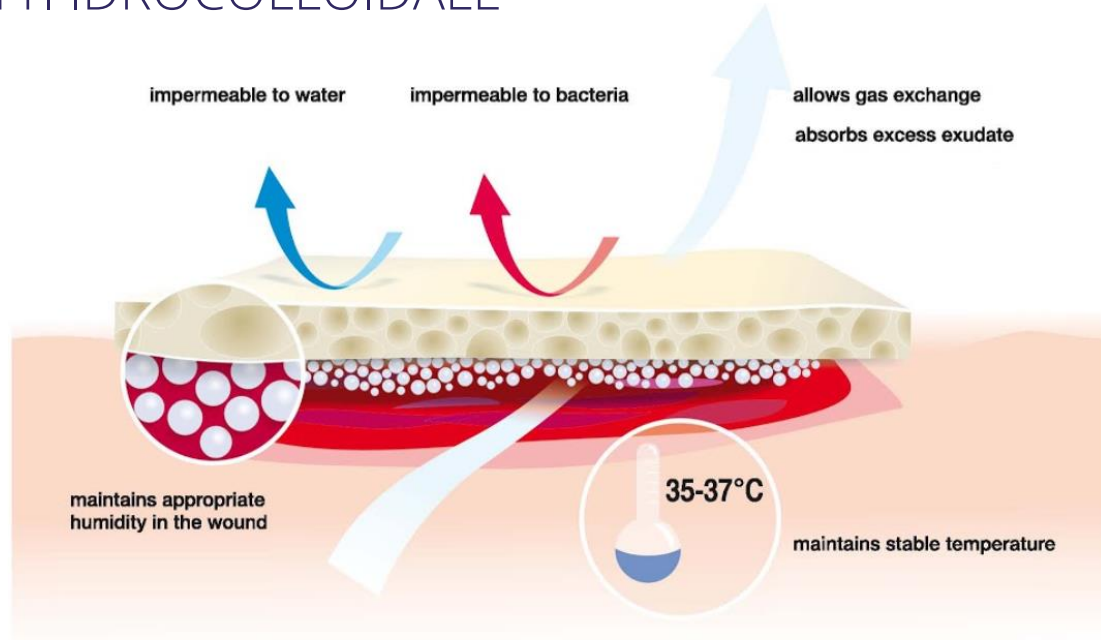

Le ferite "trattate con umidità" guariscono senza formazione di croste, il che è importante per le persone attente all'estetica - l'assenza di una crosta riduce al minimo la possibilità di formazione di cicatrici.

CARATERISTICHE DI CEROTTI COMFORT



- bassa frequenza di cambiamenti - la tecnologia idrocolloidale consente al prodotto di rimanere sulla pelle per un massimo di un lungo periodo, anche fino a 7 giorni
- impermeabile - le normali attività igieniche possono essere svolte
- bordi arrotondati - estendono l'aspetto estetico del cerotto sulla ferita e prevengono la desquamazione accidentale dei bordi
- bordi più sottili del cerotto - aderiscono perfettamente il prodotto al corpo
- ideale per le vesciche - portano sollievo immediato dal dolore, riducono il bruciore
- biocompatibile
- imballaggio comodo e riutilizzabile



OFFERTA STERILE MISURE S & M


- Per essere sterili, i cerotti devono essere sottoposti a un processo di sterilizzazione. Il processo di sterilizzazione è definito come attività che porta a privare questi prodotti di tutti i microrganismi vitali.
- I prodotti sterili sono il tipo di protezione più sicuro per le ferite con rottura della pelle, perché sono il materiale di medicazione biologica più pulito.
- I cerotti COMFORT PLUS sono sterilizzati mediante radiazioni in un processo validato (in conformità alla norma EN ISO 11137), garantendo il livello di sterilità (SAL) 10⁻⁶.
- SAL è la probabilità che un singolo microrganismo vitale appaia sul prodotto dopo la sterilizzazione.



OFFERTA STERILE MISURE S & M

Ogni confezione contiene 5 cerotti confezionati singolarmente nelle seguenti dimensioni:

- 17 mm x 48 mm (size S)
- 29 mm x 59 mm (size M)

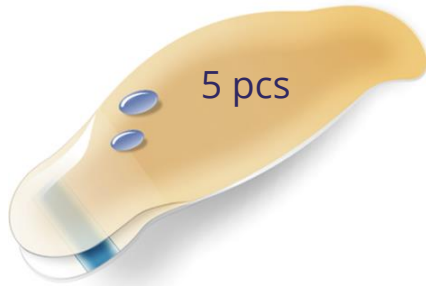

OFFERTA NON STERILE - SIZE L

I cerotti non sterili sono fabbricati in conformità con i principi di **Good Manufacturing Practice (GMP)**.


Questo documento contiene dati sulla contaminazione microbiologica accettabile dell'ambiente in cui viene eseguita la produzione.



OFFERTA NON STERILE - MISURA L

La confezione contiene 5 cerotti confezionati singolarmente nei seguenti formati:

- 42 mm x 68 mm

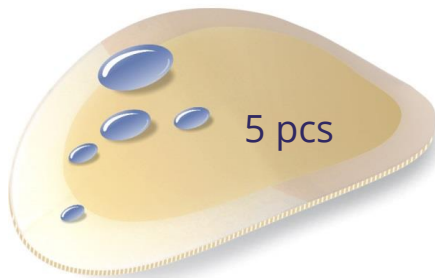

COMFORT PLUS CEROTTI IDROCOLLOIDI

Leggere attentamente le istruzioni fornite in ogni confezione. Le istruzioni si trovano all'interno del contenitore di plastica riutilizzabile, che è l'imballaggio diretto del prodotto.

I cerotti devono essere utilizzati solo in conformità con le istruzioni fornite.

IMBALLAGGIO DI SPEDIZIONE = DISPENSER

La confezione è molto pratica e funzionale.

Dopo aver strappato il lembo, la scatola di cartone può essere utilizzata per l'organizzazione e l'esposizione.



COMFORT CORN CEROTTI PER CALLI

I cerotti per calli con acido salicilico sono progettati per proteggere dalla pressione dolorosa delle lesioni cutanee, proteggere dalle abrasioni e aiutare nella rimozione efficace e sicura dei calli.

Riducono la pressione sul punto dolente, apportando un immediato sollievo.

La rimozione del callo è ulteriormente facilitata da una miscela contenuta nell'anello, contenente acido salicilico e acido lattico, oltre a saponine, terpeni e balsamo di copay.




COMFORT CORN for corns

La massa attiva dei cerotti contiene acido salicilico, acido lattico e lanolina, che idratano e ammorbidiscono il callo

COMFORT CORN CEROTTI PER CALLI

- Dispositivo medico di classe III, non sterile, realizzato su tessuto elastico
- Forma asimmetrica del prodotto
- Dimensioni: 70 x 22 mm
- Diametro massa attiva: 8 mm
- Numero di cerotti nella confezione: 6 pezzi

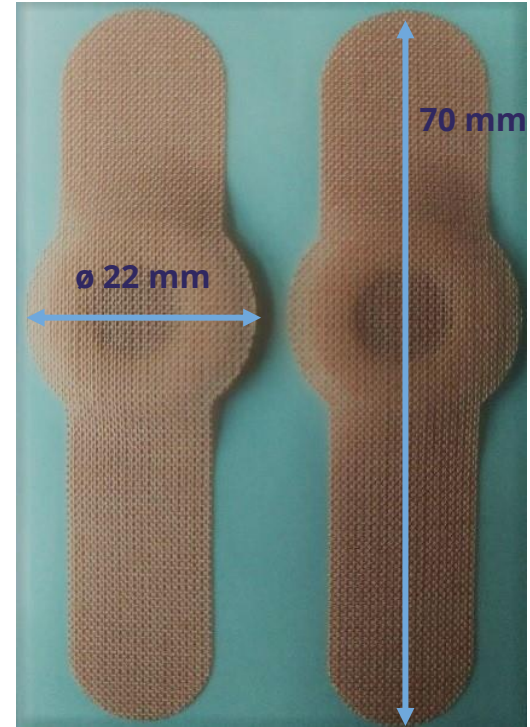

La forma asimmetrica del prodotto consente un fissaggio più facile e duraturo del cerotto sulle dita dei piedi

COMFORT CORN CEROTTI PER CALLI

- I cerotti sono confezionati in comode e pratiche bustine, da 2 pezzi ciascuna
- 3 bustine in ogni confezione
- Leggere attentamente le istruzioni fornite in ogni confezione
- I cerotti devono essere utilizzati solo in conformità con le istruzioni fornite



OPTIMED JUNIOR CEROTTI OFTALMICI

I cerotti per il trattamento della correzione visiva nei bambini.

I cerotti sono usati per coprire l'occhio sano nel trattamento dell'ambliopia, dello strabismo e della scissione causata dallo strabismo, per esempio.



OPTIMED JUNIOR CEROTTI OFTALMICI

Il metodo di occlusione - utilizzato nel trattamento dello strabismo e dell'ambliopia - con la corretta applicazione del cerotto non ci sono praticamente restrizioni.

L'applicazione del cerotto è controindicata nei bambini che sono a rischio di reazioni allergiche a qualsiasi componente del prodotto.

L'automedicazione è fuori questione. Viene sviluppato il programma in base al quale il cerotto oftalmico deve essere indossato **in collaborazione con il pediatra o l'oftalmologo pediatrico.**


Normalmente un bambino deve indossare il cerotto su un occhio tutto il tempo, ma in alcune situazioni è necessario cambiare l'occhio coperto.

OPTIMED JUNIOR

COSTRUZIONE DEL CEROTTO OFTALMICO

La particolare forma del cerotto e l'uso di uno strato scuro che filtra la luce distingue i cerotti OPTIMED JUNIOR dagli intonaci di medicazione.

1. strato esterno di tessuto non tessuto beige traspirante
2. adesivo acrilico ipoallergenico, applicato a strisce per ridurre la superficie adesiva alla pelle delicata e migliorare la traspirabilità del cerotto
3. **strato filtrante della luce- nero**
4. strato di contatto- bianco

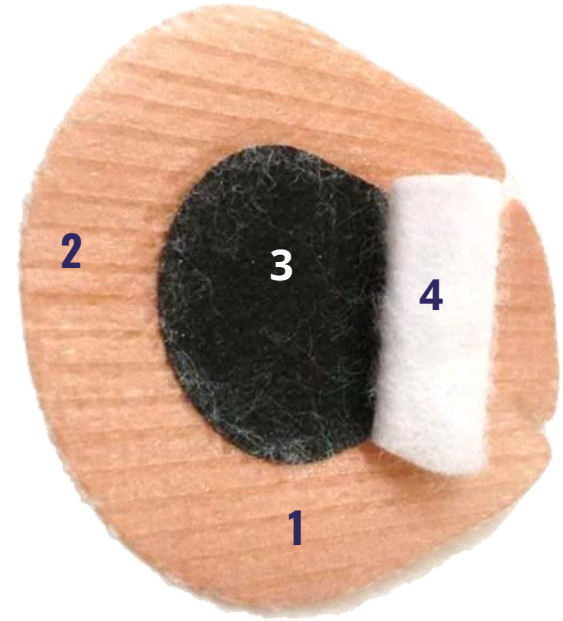

OPTIMED JUNIOR CEROTTI OFTALMICI

La confezione contiene 10 pezzi di cerotti
confezionati singolarmente nelle seguenti
dimensioni:

6 cm x 4.8 cm



10 pcs



FIXOPORE F

MEDICAZIONE PELLICOLA CON NUCLEO ASSORBENTE, STERILE

- usato per coprire ferite post operatorie, piccoli tagli e abrasioni
- la base del cerotto è trasparente e flessibile, permeabile al vapore acqueo e impermeabile all'acqua; il substrato trasparente consente di osservare l'area della ferita mentre sta guarendo
- il nucleo assorbente situato centralmente ha elevate proprietà di assorbimento e il suo strato esterno è fissato con una micro-rete che impedisce alla medicazione di attaccarsi alla superficie della ferita e alle suture



FIXOPORE F

MEDICAZIONE PELLICOLA CON NUCLEO ASSORBENTE, STERILE

- i bordi arrotondati evitano che la medicazione si stacchi
- l'ampia linguetta della carta di rilascio consente una facile applicazione della medicazione
- senza lattice
- disponibile in una dimensione di 5 cm x 7.2 cm




FIXOPORE F

MEDICAZIONE PELLICOLA CON NUCLEO ASSORBENTE, STERILE

- Fixopore F ha un sistema di applicazione eccezionalmente semplice e intuitivo (in dentazione ondulata). I fogli protettivi di rilascio numerati sono disponibili come ausilio per indossare.
- Prima di applicare la medicazione, pulire la ferita e asciugare la pelle che circonda la ferita.
- **NOTE:**
 1. Prima di utilizzare la medicazione, leggere il foglio illustrativo allegato nella confezione.
 2. La medicazione non deve essere serrata durante l'applicazione.
 3. Non toccare il nucleo assorbente durante l'applicazione.
 4. Cambiare la medicazione dipende dall'essudato della ferita.
 5. La struttura trasparente del supporto consente l'osservazione costante della pelle intorno alla ferita.
 6. Per la rimozione indolore della medicazione, staccare un angolo della medicazione, quindi tirarlo verso il basso per strappare la struttura adesiva, che si stacca facilmente e indolore dalla pelle.

FIXOPORE F ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Step 1

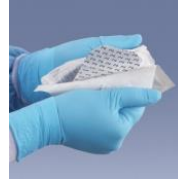

Aprire l'imballaggio dell'unità senza strappare la confezione ed danneggiare la medicazione

Step 2



Staccare la carta di rilascio inferiore contrassegnata con 1

Step 3



Posizionare la medicazione sulla ferita

Step 4



Staccare la carta protettiva inferiore contrassegnata con 2

FIXOPORE F ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE

Step 5



Attaccare l'intera superficie della medicazione alla pelle premendola sul corpo

Step 6



Staccare la carta di rilascio contrassegnata 3 afferrando i bordi al taglio ondulato tirandoli lateralmente



Step 7



Levigare la superficie della medicazione premendo i bordi sulla pelle

SUMMARY

	Comfort Plus	Comfort Corn	Optimed Junior	Fixopore F
quantity	5	6	10	5
carrier	hydrocolloid mass	elastic fabric	nonwoven	film
attached instruction	yes	yes	yes	yes
sterility	S, M - yes, L - no	no	no	yes
sizes	17 mm x 48 mm size S 29 mm x 59 mm size M 42 mm x 68 mm size L	70 x 22 mm active mass diameter 8 mm	6 cm x 4.8 cm	5 cm x 7.2 cm
packaging	GLMM	GLMM	GLMM	GLMM



Cerotti confezionati da 100 pz

CEROTTI CONFEZIONATI DA 100 PZ

Può essere tolto 1 pz e somministrato da un farmacista. Per le persone che non hanno bisogno di 12 o 20 cerotti contemporaneamente.

	Universal	Universal	Transparent	Happy	Soft	Classic
packaging photo						
size	19 mm x 76 mm	25 mm x 76 mm	średnica 22 mm	19 mm x 76 mm	6 cm x 1 m	6 cm x 1 m

RIEPILOGO DI CEROTTI E NASTRI ADESIVI NELL'OFFERTA

Cerotti e nastri adesivi

Cerotti

Set di cerotti per tutti

- Universale
- Trasparente
- Confort
- Classic
- Aqua Stop
- Family
- Set da viaggio

Set di cerotti per bambini

- Happy
- Happy Tattoo
- Kids Zoo
- Monsters

Cerotti confezionati da 100 pz/scatola

- Universal 19x76 mm
- Universal 25x76 mm
- Trasparente
- Happy
- Soft
- Classic

Cerotti per il taglio

- Classic
- Soft

Cerotti specifici

- Comfort Plus
- Comfort Corn
- Optimed Junior
- Fixopore F

FIXOPORE S - MEDICAZIONE STERILE IN TESSUTO NON TESSUTO



FIXOPORE S - MEDICAZIONE STERILE IN TESSUTO NON TESSUTO

- utilizzato per la medicazione di ferite chirurgiche, tagli e abrasioni
- il cerotto è realizzato in tessuto non tessuto bianco, poroso ed elastico che permette alla pelle di "respirare" liberamente
- il nucleo assorbente situato centralmente ha elevate proprietà di assorbimento; il suo strato esterno è rivestito con una micro-rete che impedisce alla medicazione di attaccarsi alla ferita e alle cuciture
- i bordi arrotondati proteggono la medicazione ed evitano che si stacchi
- l'ampia sovrapposizione di carta protettiva consente una facile applicazione della medicazione anche quando si indossano i guanti

FIXOPORE S - MEDICAZIONE STERILE IN TESSUTO NON TESSUTO

- disponibile anche in forma ovale da utilizzare come medicazione per gli occhi
- misure disponibili:
 - rettangolare: 5 cm x 7,2 cm, 8 cm x 15 cm, 10 cm x 6 cm, 10 cm x 8 cm, 10 cm x 20 cm, 10 cm x 25 cm, 10 cm x 30 cm, 10 cm x 35 cm
 - oval: 6,5 cm x 9,5 cm



FIXOPORE F - MEDICAZIONE A FILM STERILE



FIXOPORE F - MEDICAZIONE A FILM STERILE

- utilizzato per la medicazione di ferite chirurgiche, tagli e abrasioni
- il cerotto è costituito da film poliuretano trasparente e flessibile permeabile al vapore acqueo ma impermeabile all'acqua; la struttura trasparente consente l'ispezione visiva dell'area circostante durante la guarigione delle ferite
- il nucleo assorbente situato centralmente ha elevate proprietà di assorbimento; il suo strato esterno è rivestito con una micro-rete che impedisce alla medicazione di attaccarsi alla ferita e alle cuciture

FIXOPORE F - MEDICAZIONE A FILM STERILE

- i bordi arrotondati proteggono la medicazione ed evitano che si stacchi
- l'ampia sovrapposizione di carta protettiva consente una facile applicazione della medicazione anche quando si indossano i guanti
- senza lattice
- misure disponibili:
- 5 cm x 7,2 cm, 8 cm x 15 cm, 10 cm x 6 cm, 20 cm x 10 cm



FIXOPORE F - MEDICAZIONE A FILM STERILE

La medicazione Fixopore F ha un sistema di applicazione estremamente semplice e intuitivo. Per rendere chiaro l'ordine di applicazione, tutte le parti protettive sono numerate.

Prima dell'applicazione della medicazione la ferita deve essere pulita e la pelle che circonda la ferita deve essere asciugata.

NOTA: Il cambio di medicazione dipende dalla quantità di essudato della ferita. La struttura trasparente del materiale di supporto consente un'ispezione visiva costante della pelle intorno alla ferita.


Non allungare la medicazione durante l'applicazione.

Non toccare il cuscinetto assorbente durante l'applicazione.

Per rimuovere indolore la medicazione staccare un angolo della medicazione e quindi allungarsi verso il basso strappare la struttura dell'adesivo, che viene facilmente e indolore rimosso dalla pelle e dalla ferita.

FIXOPORE F - MEDICAZIONE A FILM STERILE

Step 1

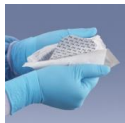

Aprire l'imballaggio dell'unità senza strappare la confezione ed estrarre la medicazione

Step 2



Staccare la carta protettiva inferiore contrassegnata con 1

Step 3



Posizionare la medicazione sulla ferita

Step 4



Staccare la carta protettiva inferiore contrassegnata con 2

FIXOPORE F - MEDICAZIONE A FILM STERILE

Step 5



Attaccare l'intera superficie della medicazione alla pelle premendola sul corpo

Step 6



Staccare la carta di rilascio contrassegnata 3 afferrando i bordi al taglio ondulato tirandoli lateralmente



Step 7



Levigare la superficie della medicazione premendo i bordi sulla pelle